



Molift Lifter & Gurte

Transferlösungen

 **etac**®



Etac – Creating Possibilities

Etac ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von ergonomischen Hilfsmitteln und Geräten zur Patientenhandhabung. Über unsere spezialisierten Produktmarken bieten wir hochmoderne Produkte für eine Vielzahl von täglichen Bedürfnissen und Pflegeeinstellungen für alle Lebensphasen. Unabhängig davon, ob es sich um eine Lösung für ein Kind oder eine ältere Person handelt, ist es unser Ziel, die Fähigkeiten des Einzelnen zu fördern und die Arbeitsbedingungen der Pflegekraft zu verbessern – durch Qualität, Funktionalität und Design.

molift[®]

Molift by Etac – bietet ergonomische Lifter, Gurte und Transferhilfsmittel, die sichere und komfortable Transfers in verschiedenen Pflegeumgebungen ermöglichen, sowohl für die Pflegekraft als auch für den Patienten.



Aufstehhilfen

Etac Turner PRO	5
Molift Raiser Pro.....	6
Molift Quick Raiser 1	7
Molift Quick Raiser 2	8
Molift Quick Raiser 205.....	9
Molift RgoSling Active	10



Mobile passive Lifter

Molift Smart 150.....	12
Molift Partner 255	13
Molift Mover	14
Molift Aufhängungen (Hebearme)	16
Molift Service Tool.....	17



Deckenlifter

Molift Nomad.....	19
Molift Air	20
Molift Schienensystem (MRS)	24
Molift Service	26
Molift Quattro	28
Molift Duo	29



Stretcher

Molift RgoSling Fabric Stretcher	31
Molift Stretcher	32
Molift Lifter-Zubehör	33



Molift RgoSling 4-Punkt Liftergurte

Molift RgoSling HighBack	36
Molift RgoSling MediumBack.....	36
Molift RgoSling Toilet	37
Molift RgoSling Amputee	37
Molift RgoSling Shadow.....	38
Molift RgoSling Komfort HighBack	38
Molift RgoSling Ambulating Vest.....	39
Molift RgoSling Repositionierungstuch	40



Molift EvoSling 2-Punkt Liftergurte

Molift EvoSling LowBack.....	44
Molift EvoSling Shadow HighBack	45
Molift EvoSling FlexiStrap	46

Molift UnoSling Gurte

Molift UnoSling HighBack	49
Hinweise	50
Molift Gurt-Zubehör	51



Aufstehhilfen

Mit Turner PRO, Molift Raiser Pro und der Molift Quick Raiser Familie haben wir mehrere Aufstehhilfen, bei denen der Patient unterschiedlich stark mitarbeiten muss. Molift Raiser Pro und Molift Quick Raiser 205 basieren auf den gleichen ergonomischen Prinzipien – sie ahmen den natürlichen Bewegungsablauf nach.

Etac Turner PRO

Transfer-Plattform – Drehscheibe zum Festhalten

Die Wichtigkeit sicherer Transfers

Pflegebedürftige Personen fühlen sich in Transfersituationen oft unsicher und Pflegende sind dabei hohen Belastungen ausgesetzt. Das Unfallrisiko und die Unsicherheit von Patient und Pflegenden führen zu weniger Transfers und weniger Mobilisation.

Der Turner PRO gibt sowohl dem Pflegebedürftigen als auch dem Pflegenden, ein sicheres Gefühl, damit der Transfer mit Leichtigkeit gelingt.

Einfache Nutzung

Turner PRO ist das perfekte Hilfsmittel für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und für daheim.

Das intuitive Design erleichtert die Handhabung. Lediglich die Einstellung des Handgriffs und der Beinstützen ist notwendig.

Eigenschaften

- Das Orange am Griff ist eine starke, kontrastreiche Farbe, die Sehbehinderten oder Demenzkranken die Handhabung erleichtert
- Etac Turner PRO ist kompakt und einfach zu transportieren, leicht zu greifen und hat ein geringes, ausbalanciertes Gewicht
- Die winkelverstellbaren Beinstützen sind weich, bequem, geben seitlichen Halt und sind einfach in der Höhe zu verstellen



HMV-Nr.

Etac Turner PRO: 22.29.01.1061

Beschreibung	Maße	Art.-Nr.	Maße	
Etac Turner PRO	800 - 1200 mm	16090106	Unterschenkelstützhöhe	150 mm
			Stützweite des Unterschenkels	380 mm
Material				
Aluminiumguss, pulverbeschichteter Stahl, Chrom				
Gewicht				
Gesamtgewicht	7.2 kg			
Maximales Benutzergewicht (SWL)	200 kg			





Molift Raiser Pro

Die ergonomische Transferplattform

Eigenschaften der manuellen Aufsteh-, Umsetz- und Transferhilfe

- Ergonomischer Durchmesser der Handgriffe (26-28 mm)
- Zwei Höhen zur Befestigung des Gürtels
- Form der Halteknöpfe erleichtert das Einhängen des Gurtes
- Weiche, geformte, höhen- und winkelverstellbare Beinstützen
- Zentrale Bremse für beide Räder in Signalfarbe und auditiver Rückmeldung
- Handgriff zum Transport der Fußplatte
- Niedrige Einstiegshöhe! Nur noch 35 mm
- Aluminium Platte pulverbeschichtet sowie Anti-Slip-Kunststoffoberfläche mit Fußgrafik



Raiser Gürtel

Der Gürtel inkl. Gurt verhindert ein Abrutschen des Gurtes dank Gürtelschnalle.



Weitere Verbesserungen

- Produktgewicht von nur 10 kg (vorher: 14,2 kg)
- Nutzergewicht von 170 kg (vorher 150 kg)
- Weniger Wartungsaufwand
- Verkaufs- und lagerfreundliche Verpackung
- Bessere Stabilität für unterschiedliche Körpergrößen
- Schnellere Montage durch Schraubverschluss von Handgriff und Bodenplatte

Beschreibung

Molift Raiser Pro	16090204
Molift Raiser Gürtel L/XL	82965
Molift Raiser Gürtel S/M	82964

Material

Pulverbeschichtetes Aluminium, Kunststoff, Stahl, Chrom 3.

HMV-Nr.

Etac Raiser: 22.29.01.1034

Art.-Nr.

Gewicht

Gesamtgewicht

Sichere Arbeitslast (SWL)

10 kg

170 kg



Molift Quick Raiser 1

Kompaktes Design und hervorragende Beweglichkeit selbst in engen Räumen

Kompakt und einfach

Dank des kompakten Designs und des geringen Gewichts lässt sich der Molift Quick Raiser 1 sicher und leicht manövrieren. Die einzigartige Radstellung und die nahezu perfekte Gewichtsverteilung des Basisgestells sorgen für einen geringen Drehradius mit leichter Beweglichkeit sogar bei beengten Platzverhältnissen.

Natürlicher Bewegungsablauf

Die gerade, geneigte Säule imitiert den natürlichen Bewegungsablauf und erfüllt den Hebebedarf der Anwender auch bei unterschiedlicher Belastung. Molift Quick Raiser 1 verfügt über eine Traglast von 160 kg. Das extra niedrige Basisgestell mit 70 mm Höhe und einer Beinbreite von 340 mm, ist passend für Toiletten und lässt sich unter die meisten Betten, Stühle und Rollstühle platzieren.

Eigenschaften

- Extra niedriges Fahrgestell mit schmaler Beinbreite für einen leichten Einstieg
- Geringes Gewicht, ist stabil und lässt sich leicht manövrieren
- Kniekissen höhenverstellbar – können für eine alternative Unterstützung der Beine umgedreht werden



HMV-Nr.

Quick Raiser 1: 22.40.01.1025

Beschreibung		Art.-Nr.	Nennleistung	40 Hubvorgänge (bei: 75 kg und 500 mm)
Molift Quick Raiser 1, V-förmiger Arm		M04100		
Molift Quick Raiser 1, U-förmiger Arm		M04150		
Material		Maße		
Aluminium, Stahl		Beinhöhe	70 mm	
		Breite, Basisgestell	610 mm	
		Länge	955 mm	
Gewicht		Reinigungshinweise		
Gesamtgewicht		Reinigungsmittel müssen pH-neutral sein. Für Desinfektionszwecke Isopropylalkohol benutzen. Keine Lösungsmittel oder scharfen / ätzenden Flüssigkeiten benutzen, da sie die Oberflächen angreifen können.		
29 kg		    		
Technische Informationen				
integrierte Service-Software				
Batterie				
NiMH 14,4 V - 2,2 Ah (0541000)				
Batterie-Ladezeit				
ca. 3 Stunden				
Hub-/Senkgeschwindigkeit				
50 mm/s bei 75 kg				



Molift Quick Raiser 2

Aufstehlifter mit elektrisch verstellbaren Beinen

Stabil und leicht zu manövrieren

Der Molift Quick Raiser 2 mit elektrisch verstellbarem Gestell ist kompakt, stabil und leicht zu manövrieren. Die einzigartige Radstellung und die nahezu perfekte Gewichtsverteilung des Basisgestells sorgen für einen kleinen Wendekreis mit leichter Manövrierbarkeit sogar in engen Räumen.

Passt fast überall

Die gerade, geneigte Säule imitiert den natürlichen Bewegungsablauf und erfüllt den Hebebedarf der Anwender auch bei unterschiedlicher Belastung. Molift Quick Raiser 2 verfügt über eine Traglast von 160 kg. Das niedrige Basisgestell von 100 mm passt unter fast alle Betten und Stühle, während die elektrisch verstellbaren Beine fast überall für eine gute Zugänglichkeit sorgen.

Eigenschaften

- Elektrisch verstellbare Beine – wenn der Lift zusammen mit Stühlen eingesetzt wird, die nicht von unten her zugänglich sind
- Die gerade, geneigte Säule imitiert einen natürlichen Bewegungsablauf
- Kniekissen höhenverstellbar

HMV-Nr.

Quick Raiser 2: 22.40.01.1024



Beschreibung

Molift Quick Raiser 2, V-förmiger Arm
Molift Quick Raiser 2, U-förmiger Arm

Art.-Nr.

M04200
M04400

Maße

Beinhöhe 100 mm
Breite, Basisgestell 610 mm
Länge 1150 mm

Material

Aluminium, Stahl

Gewicht

Gesamtgewicht 36 kg

Technisches

integrierte Service-Software inbegriffen
Batterie NiMH 14,4 V – 2,2 Ah (0541000)
Batterie-Ladezeit ca. 3 Stunden
Hub-/Senkgeschwindigkeit 50 mm/s bei 75 kg
Nennleistung 40 Hubvorgänge
(bei: 75 kg und 500 mm)

Reinigungshinweise

Reinigungsmittel müssen pH-neutral sein. Für Desinfektionszwecke Isopropylalkohol benutzen. Keine Lösungsmittel oder scharfen / ätzenden Flüssigkeiten benutzen, da sie die Oberflächen angreifen können.



Molift Quick Raiser 205

Eine ergonomische Aufstehhilfe mit herausragender Traglast

Stabil und kompakt

Der Molift Quick Raiser 205 ist auf dem Stand der modernen Technik mit serienmäßig elektrisch spreizbarem Fahrgestell. Er ist außergewöhnlich komfortabel, stabil und verfügt über eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit. Die einzigartige Radposition, die abgewinkelten Schiebegriffe und die optimierte Gewichtsverteilung der Grundplatte sorgen für einen kleinen Wenderadius. Mit den alternativ erhältlichen kleinen Rollen passt er unter die meisten Betten und Stühle und das elektrisch verstellbare Fahrgestell ermöglicht fast unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Bei stark eingeschränkten Platzverhältnissen empfehlen wir die Ausführung mit starrem Fahrgestell.

Eigenschaften

- Ergonomisches Design – die schräg verlaufende Säule sorgt für einen natürlichen Bewegungsablauf beim Aufstehen und Hinsetzen
- Aktiver 4-Punkt Hebearm – bietet in Verbindung mit dem RgoSling besonderen Halt während des Anhebens vom Sitzen zum Stehen
- Verfügbar auch mit traditionellem 2-Punkt StandUp Hebearm
- Automatische Warnung für periodische Inspektionen und Service



HMV-Nr.

Quick Raiser 205 (Art.-Nr.: M29000): 22.40.01.1045

Molift Quick Raiser 205

Batterie

Modell Art.-Nr.

Verstellbares
Fahrgestell Starres
Fahrgestell

SLA Batterie	Aktiv 4-Punkt, kleine Rollen	M29000	M29150
	StandUp 2-Punkt, kleine Rollen	M29001	M29151
	Aktiv 4-Punkt, große Rollen	M29100	M29200
	StandUp 2-Punkt	M29101	M29201
LI Batterie	Aktiv 4-Punkt, kleine Rollen	M29002	M29152
	StandUp 2-Punkt, kleine Rollen	M29003	M29153
	Aktiv 4-Punkt, große Rollen	M29102	M29202
	StandUp 2-Punkt, große Rollen	M29103	M29203

Zubehör

StandUp 2-Punkt-Hebearm
Fußstandserhöhung
Anti-Rutschmatten für Fußplatte
Optionale Beinstütze und Kissen

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie auf Seite 38.

Gewicht

Maximales Benutzergewicht (SWL) 205 kg
Gesamtgewicht 44 (42,5) kg

Maße

Radstandsweite außen 620 mm
Radstandsweite innen 200 mm
Höhe des Fußbretts:
Kleine Rollen Ø 75/50 mm 65 mm
Große Rollen Ø 100/75 mm 90 mm

Technisches

Ladezeit 6 h
Leistungsangaben 100 Lifts/75 kg/500 mm
Hubbereich 600 mm
Wendekreis 1150 mm
Hubgeschwindigkeit 75 kg 35 mm/s
Hubgeschwindigkeit 205 kg 30 mm/s






Molift RgoSling Active

Gurte für Aufstehhilfen


Die idealen Gurtlösungen für aktive Transfers mit dem Molift Quick Raiser 205

Komfort und einfacher Transfer

Molift RgoSling Aktiv ist ein gepolsterter Gurt, der für aktives Heben mit dem Molift Quick Raiser 205 entwickelt wurde. Er bietet eine perfekte Lendenwirbelstütze und ist die ideale Gurtlösung für das Bewegen zwischen verschiedenen Sitzpositionen. Der RgoSling Active ist schnell und einfach angelegt. Er hat eine wirksame Anti-Rutsch-Beschichtung, um zu verhindern, dass er während des Transfers nicht nach oben rutscht. Die breite Rückenstütze verteilt Gewicht und Druck gleichmäßig auf einer großen Fläche, was den Komfort für den Benutzer erhöht. Der Hüftgurt bietet zusätzliche Unterstützung und Stabilität. Die Gleitschlaufen passen sich automatisch der Größe des Benutzers an und bieten so besonderen Halt der Hüfte im Stehen.

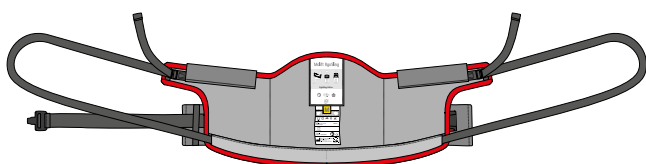

Molift RgoSling Active

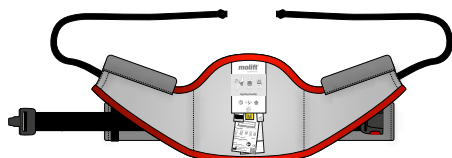

Molift RgoSling StandUp

Molift RgoSling StandUp ist für einen 2-Punkt-Hebearm ausgelegt. Er ist schnell und einfach um den Benutzer herum angelegt. Das Design macht ihn ideal für den Einsatz in Toilettensituationen.



RgoSling Active und Quick Raiser 205 mit 4-Punkt-Hebearm

Eigenschaften

- Die ideale Gurtlösung für das Heben und Bewegen zwischen verschiedenen Sitzpositionen
- Selbstjustierende Gleitschlaufen (RgoSling Active)
- Großflächiger und stabiler Halt
- Komfort, Sicherheit und Stabilität
- Einfache Anwendung

Molift RgoSling

	Gelenk	Art.-Nr.
RgoSling Active 4-Punkt XS	500–720 mm	1720910
RgoSling Active 4-Punkt S	590–830 mm	1720920
RgoSling Active 4-Punkt M	730–950 mm	1720930
RgoSling Active 4-Punkt L	950–1210 mm	1720940
RgoSling Active 4-Punkt XL	1200–1390 mm	1720950

	Gelenk	Art.-Nr.
RgoSling StandUp 2-point XS	530–710 mm	1720710
RgoSling StandUp 2-point S	640–850 mm	1720720
RgoSling StandUp 2-point M	740–960 mm	1720730
RgoSling StandUp 2-point L	930–1220 mm	1720740
RgoSling StandUp 2-point XL	1150–1430 mm	1720750

Informationen

Weitere Informationen zu den Aktiv- und StandUp-Hebearmen finden Sie auf S. 20

Material

Polyester



Molift Quick Raiser 205

Alle Quick Raiser Modelle



Mobile passive Lifter

Die mobilen Lifter von Molift sind bekannt für viele innovative und intuitive Lösungen wie die 4-Punkt-Aufhängung, die integrierte Service-Software, ein kompaktes Design, geringes Gewicht und eine ergonomische, benutzerfreundliche Bedienung .



Molift Smart 150

Leicht und ohne Werkzeug zusammenklapp- und transportierbar

Kompakte Intelligenz

Der Molift Smart 150 ist so konzipiert, dass er, leicht zu rollen und zu transportieren ist, wo immer er benötigt wird. Er wurde für die Pflege zu Hause und für die Reise entwickelt und lässt sich leicht verstauen. Der Molift Smart ist ohne Werkzeug in einem Stück faltbar. Aufgrund seines geringen Gewichts, der kleinen Standfläche und der einzigartigen Konstruktion ist der Molift Smart 150 auch in engen Räumen leicht zu manövrieren. Der Hubbereich von 270 – 1680 mm bietet einerseits eine hervorragende maximale Hubhöhe und lässt sich andererseits so tief absenken, dass auch das Heben eines am Boden liegenden Patienten komfortabel möglich ist. Durch die 4-Punkt-Aufhängung ist ein komfortabler und entspannter Transfer gewährleistet. Der Molift Smart 150 erhielt die Auszeichnung für Design Excellence vom Norwegischen Design Council.

Eigenschaften

- Komfortable und entspannte Transfers
- Kompakt und faltbar ohne Werkzeug
- Geringes Gewicht und kleine Standfläche
- Lifts vom Boden
- Leicht zu manövrieren



Molift Smart 150 gefaltet



Molift Smart 150 Transportkoffer

HMV-Nr.

Molift Smart 150: 22.40.01.0044

Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Technisches
Molift Smart 150 (inkl. Hebebügel)	M10200	Gesamtgewicht 26 kg Gewicht, wenn oberer Teil getrennt jeweils 13 kg	integrierte Service-Software Batterie Batterie-Ladezeit Hubgeschwindigkeit Leistungsangaben
Zubehör Transporttasche Reisekoffer Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie auf S. 38		Maße Länge 1200 mm Beinhöhe 110 mm Maße gefaltet L1160 x B475 x H360 mm Hubhöhe 270–1665 mm Hubintervall 1410 mm	inbegriffen NiMH 14,4 V – 2,6 Ah ca. 3 h 60 mm/sek 50 Lifts/75 kg/500 mm
Material Aluminium, Stahl			

Molift Partner 255

Das Flaggschiff der mobilen Lifter von Molift – die Lösung für hoch komplexe Situationen

Vertikale Hubbewegung

Der Molift Partner 255 bietet die ideale Lösung für das Heben in Situationen mit hoher Komplexität. Das gilt für Akut- und Intensivpflegebereiche sowohl in Krankenhäusern als auch in Pflegeeinrichtungen. Mit dem hervorragenden Hubbereich ermöglicht der Molift Partner 255 einfaches Anheben vom Boden und auch von höheren Flächen. Die gerade, vertikale Säule in Verbindung mit der festen Aufhängung sorgt für außergewöhnliche Stabilität und hält den Patienten im perfekten Abstand zur Säule.

Stabilität, Manövrierfähigkeit und Hebekapazität

Der Molift Partner 255 ist einer der leichtesten in seiner Kategorie. Seine außergewöhnliche Bauweise, das Design und die Anordnung der Rollen, lässt ihn selbst bei einer Tragfähigkeit von 255 kg sehr leicht manövrieren.

Der Molift Partner 255 ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich, um ihn optimal an die Bedürfnisse anzupassen; niedriges Fahrgestell, Stützarme für Gleichgewichts-, Schritt- und Gehübungen sowie Waage.



Eigenschaften

- Hohe Tragkraft
- Fixierte Aufhängung und gerade vertikale Säule für sicheres und stabiles Heben
- Geringes Gewicht
- Optimales Liften von Stretchern

Beschreibung

Molift Partner 255 (ohne Hebearm)	M13000
4pt Hebearm für Partner 255 M	1330160
4pt Hebearm für Partner 255 L	1330161
4pt Hebearm für Partner 255 XL	1330162
8pt Hebearm für Partner 255	2140002
Geeichte Waage inkl. spez. 4pt Hebearm	1331002

Zubehör

Rollen mit Richtungssperre
Waage max. 300kg
Stretcher (siehe ab S. 35)

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie auf S. 38

Art-Nr.

Material

Aluminium, Stahl

Gewicht

Gesamtgewicht 42,5 kg

Maße

Länge	1285 mm
Fahrgestellbreite (außen)	700 mm
Fahrgestellbreite (innen)	550 mm
Fahrgestellbreite, Beine offen (innen)	1065 mm
Hubhöhe	390–1680 mm
Hubintervall	1290 mm
Beinhöhe	115 mm

Technisches

integrierte Service-Software	inbegriffen
Batterie	NiMh 26.4 V – 2.6 Ah
Batterie-Ladezeit	ca. 3 h
Hubgeschwindigkeit	30 mm/sek
Leistungsangaben	50 Lifts/75 kg/500 mm





Molift Mover

Eine Familie von kompakten, leichten Liftern mit großer Flexibilität und großem Hubintervall. Geeignet für die häusliche Pflege, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Großer Hubintervall

Die Molift Mover haben eine leichte Aluminium-Konstruktion, die einfaches Manövrieren ermöglicht. Das geringe Gewicht in Verbindung mit hoher Traglast macht die Molift Mover zu den Besten ihrer Klasse. Das große Hubintervall ermöglicht einfaches Anheben vom Boden und auch von höheren Flächen. Das integrierte Molift Service Tool garantiert perfekten Service und Wartung.

Ergonomische Handhabung

Für eine bessere Handhabung sind die Molift Mover Lifter mit dem einzigartigen intuitiven Bediengriff ausgestattet. Er bietet den Pflegekräften Flexibilität und variable Griffmöglichkeiten. So können Sie in jeder Situation ergonomisch und sicher arbeiten. Die leicht erreichbare Handsteuerung bietet erhöhte Benutzerfreundlichkeit.

Eigenschaften

- Leichter, kompakter Lifter
- Transportabel
- Sehr einfach zu manövrieren
- Großer Hubintervall
- Liften vom Boden

Molift Mover 180

Der Molift Mover eignet sich für Transfers in der häuslichen und institutionellen Pflege. Optionale 2- oder 4-Punkt-Aufhängung mit Schnellkupplung.



HMV-Nr.

Molift Mover: 22.40.01.0082

Molift Mover

Varianten (ohne Hebebügel)

	Mover 180	Mover 205	Mover 300
Standard Fahrgestell, kleine Rollen	M18000	M14000	M15050
Standard Fahrgestell, große Rollen	M18003	-	-
Fahrgestell, mittlere Basis	-	-	M15051
Fahrgestell, niedrige Basis	-	M14050	-
Standard Fahrgestell + Stützarme	-	M14150	M15150
Fahrgestell, mittlere Basis + Stützarme	-	-	M15151

Art.-Nr.

Zubehör

Mover 180:

Mover 205/300:

Waage

Verschiedene Hebebügel (siehe S. 20)

Verschiedene Hebebügel (siehe S. 20)

Stützarme

kleine Rollen

Molift Stretchers (siehe S. 37)

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie auf S. 38



Molift Mover 205

Der Molift Mover 205 ist ein Arbeitstier für den häufigen und alltäglichen Gebrauch, geeignet für Transfers in Pflege- und Krankenhausumgebungen. Die Schnellkopplung bietet optional 2- oder 4-Punkt-Aufhängungen in verschiedenen Abmessungen. Ein Lifter mit großer Flexibilität und viel Zubehör.



Molift Mover 300

Der Molift Mover 300 hat eine hohe Traglast von 300 kg. Er ist die ideale Lösung für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen mit bariatrischen Patienten, die mit häufige und alltäglichen Bewegungs- und Umlagerungsbedürfnissen haben. Mit seinem geringen Gewicht und seiner hohen Kapazität ist er der Leichteste seiner Klasse.



Molift Mover 300 mit Armstützen

Daten	Molift Mover 180	Molift Mover 205	Molift Mover 300
Maximales Benutzergewicht (SWL)	180 kg	205 kg	300 kg
Gesamtgewicht	35 kg	37,6 kg	40,1 kg
Länge	1260 mm	1285 mm	1285 mm
Fahrgestellbreite (außen)	700 mm	700 mm	700 mm
Fahrgestellbreite (innen)	550 mm	550 mm	550 mm
Fahrgestellbreite, Beine offen (innen)	1025 mm	1065 mm	1065 mm
Beinhöhe	105 mm	115 mm	115 mm
Batterie	NiMH 14.4 V - 2.6 Ah	NiMH 26.4 V - 2.6 Ah	NiMH 26.4 V - 2.6 Ah
Batterie-Ladezeit	3 h	3 h	3 h
Hubhöhe (maximal)	1940 mm	2093 mm	2100 mm
Hubgeschwindigkeit	40 mm/sek	40 mm/sek	32,6 mm/sek
Hubintervall	1365 mm	1431 mm	1420 mm
Leistungsangaben	50 Lifts/75 kg /500 mm	50 Lifts/75 kg /500 mm	50 Lifts/75 kg /500 mm
integrierte Service Software	inbegriffen	inbegriffen	inbegriffen
Material	Aluminium, Stahl, Kunststoff	Aluminium, Stahl, Kunststoff	Aluminium, Stahl, Kunststoff



Molift Aufhängungen (Hebearme)

Leichtgewichtsaufhängungen mit Schnellkopplung

Molift Aufhängungen aus Aluminium passen zu neuen und bestehenden Liftern. Die leichte Aufhängung begünstigt ein geringes Gesamtgewicht des Lifters und die Schnellkopplung erleichtert es dem Pflegepersonal die Hebearme zu wechseln und zu tragen.

Die optional erhältliche Aufhängung mit der Klasse III Waage entspricht allen technischen Standards. Sie kann auch den BMI (Body Mass Index) per Knopfdruck berechnen.



Art.-Nr.	Mover 180	Art.-Nr.	Mover 205	Art.-Nr.	Mover 300
1830110	4pt Hebebügel 350 (S) für Mover	1530101	4pt Hebebügel 450 (M) für Mover 205/300	1530101	4pt Hebebügel 450 (M) für Mover 205/300
1830111	4pt Hebebügel 450 (M) für Mover	1530102	4pt Hebebügel 550 (L) für Mover 205/300	1530102	4pt Hebebügel 550 (L) für Mover 205/300
1830112	4pt Hebebügel 550 (L) für Mover	1530103	4pt Hebebügel 650 (XL) für Mover 205/300	1530103	4pt Hebebügel 650 (XL) für Mover 205/300
1830043	2pt Hebebügel 350 (S) für Mover	1430115	2pt Hebebügel 550 (L) für Mover 205	1530110-KG	Geeichte Waage inkl. 4pt Hebebügel 450 (M) M205/300
1830042	2pt Hebebügel 450 (M) für Mover	1430116	2pt Hebebügel 450 (M) für Mover 205	1530111-KG	Geeichte Waage inkl. 4pt Hebebügel 550 (L) M205/300
1830041	2pt Hebebügel 550 (L) für Mover	1430117	2pt Hebebügel 350 (S) für Mover 205		
		1530110-KG	Geeichte Waage inkl. 4pt Hebebügel 450 (M) M205/300		
		1530111-KG	Geeichte Waage inkl. 4pt Hebebügel 550 (L) M205/300		
		1430120-KG	Geeichte Waage inkl. 2pt Hebebügel 350 (S) M205		
		1430121-KG	Geeichte Waage inkl. 2pt Hebebügel 450 (M) M205		
		1430122-KG	Geeichte Waage inkl. 2pt Hebebügel 550 (L) M205		

Maße

Hebebügel	4-Punkt	H210 x B300 x L350 mm	H240 x B300 x L400 mm	H240 x B350 x L500 mm
Hebebügel	2-Punkt	H130 x L350 mm	H130 x L450 mm	H130 x L550 mm
Hebebügel	8-Punkt	-	L1430 x B920 x H420 mm	-

Material

Aluminium, Zink

Molift Service Tool

Die Software, die mit dem Lifter interagiert


Rechtzeitigen Service und Wartung gewährleisten

Alle Molift-Lifter haben eine Service-Software integriert, die anzeigt, wann der nächste Service notwendig/fällig ist. Dies bietet dem Nutzer, dem Pflegenden und dem Betreiber die Sicherheit, dass der Lifter jederzeit gemäß der Regularien sicher in der Anwendung ist.

Das Molift Service Tool zählt die Anzahl der Hübe unter Belastung und gibt ein Warnsignal, wenn ein Service notwendig ist.

Zudem kann ein Techniker sich über das Tool mit dem Lifter verbinden und Prüfung durchführen. Die Software erlaubt das Lesen, Prüfen und Anpassen von Schlüsseleinstellung sowie das Protokollieren, Lesen und Drucken der Service-Historie.

Die Software zeigt auch die Produktspezifikationen an.

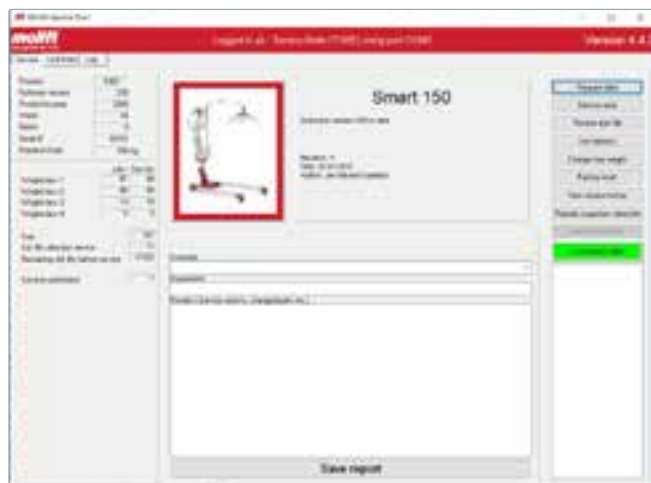

Die Molift Service Software hilft uns Daten zu sammeln und die Weiterentwicklung der Lifter zu verbessern.

Aufzeichnung und Analyse der Nutzung

Das Molift Service Tool kann auch Daten zum Nutzungsverhalten des Lifters abrufen.



**Zugang zum Service Tool und
Softwarekabel nach Technik-
Zertifizierung erwerbbar!**

Beschreibung

Software inkl. USB Kabel (13-polig DIN)
Kabel (USB/mini) für Quick Raiser 205

Art.-Nr.

1299002
2920133



Deckenlifter

Molift Deckenlifter und das Schienensystem (MRS) sind die optimale Lösungen Pflegende zu unterstützen. Die Lifter sind intuitiv und sicher zu nutzen und können jeden Bedarf für immobile Personen lösen. Das funktionelle und benutzerfreundliche Design verbessert den Zugang zum Patienten und erhöht die Sicherheit auch für den Pflegenden.

Molift Nomad

Der portable leichtgewichtige Deckenlift, geeignet für tägliche Transfers

Geringes Gewicht – hohe Hubkapazität

Das Gewicht des Molift Nomad beträgt nur 6,8 kg. Trotz des geringen Eigengewichts kann der Nomad bis zu 255 kg liften. Molift Nomad ein einzigartiges gebogenes Design und eine integrierte 4-Punkt Aufhängung. Zusammen mit einem Molift Gurt gibt es dem Nutzer eine komfortable Position. Molift Nomad ist mit vielen Sicherheitsfunktionen ausgestattet wie z.B. einem elektronischen Überlastungs- Schutz sowie einer elektronischen Notfallabsenkung und -stopp.

Einfacher Raum-zu-Raum Transfer

Molift Nomad hat integrierte Tragegriffe für das einfache Handling. Die Verbindung ist einfach und es wird kein Werkzeug benötigt. In Kombination mit einem speziell designtem Fahrwagen in der Schiene kann der Nomad von einem zum anderem Schienensystem "klettern" - ohne eine Verbindungsscheine. Mit Hilfe des Molift Nomad Einhängearm kann der Lifter einfach vom Fahrwagen ent- und verbunden werden. Der verfügbare Transportwagen ist ideal um den Lifter zu transportieren.

Eigenschaften

- Geringes Gewicht, aber hohe Hubleistung
- Portabel
- Kletterfunktion von Raum zu Raum
- Integrierte 4-Punkt Aufhängung
- Einfaches Ent- und Verbinden mit dem Fahrwagen in der Schiene

HMV-Nr.

Molift Nomad: 22.40.06.0001



Beschreibung

Molift Nomad 160	M22160
Molift Nomad 205	M22205
Molift Nomad 230	M22230
Molift Nomad 255	M22255

Zubehör

Einhängearm (L900 mm)
Einhängearm (L1050 mm)
Waage
Transportwagen
Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie auf S. 38

Art-Nr.

Material

Faserverbundstoff und Aluminium

Gewicht

Maximales Benutzergewicht 160/205/230/255 kg
Gewicht 6.8 kg

Maße

L522 x W200 x H330 mm

Technisches

integrierte Service-Software
Batterie inbegriffen
NiMh 26.4 V ~ 2.6 Ah

Batterie-Ladezeit
Hubgeschwindigkeit
Leistungangaben
Hubhöhe maximal

ca. 3 h
30 mm/sek
80 Hübe/75 kg/500 mm
2000 mm





Molift Air

Klein, kompakt und leicht zu installieren

Molift Air 205

Molift Air ist eine innovative, funktionale und gut durchdachte Beförderungslösung für Anwender mit Behinderungen. In Kombination mit dem Molift-Schienensystem (MRS) löst der Molift Air alle Hebesituationen in Pflegebereich und anderen Patientenumgebungen.



Molift Air 300

Molift Air 300 bietet bei bariatrischen Patienten Hilfe und eine Hubleistung von 300 kg. Er ist eine innovative, funktionale und gut durchdachte Beförderungslösung für Anwender mit Behinderungen.



Beschreibung

Molift Air 200 , inkl. Ladegerät u. Handschalter, ohne Fahrwagen u. Aufhängung	M26200
Molift Air 205 (alt)	M25205
Molift Air 300 (alt)	M25300
Molift Air 205 mit Fahrtrieb	M26205
Molift Air 300 mit Fahrtrieb	M26300
Molift Air 205 IRC	M27205
Molift Air 300 IRC	M27300
Molift Air 205 IRC mit Fahrtrieb	M28205
Molift Air 300 IRC mit Fahrtrieb	M28300

Zulässige Arbeitsbelastung

Molift Air 205: 205 kg (450 lbs)
Molift Air 300: 300kg (660 lbs)

Gewicht

Gesamtgewicht 7,5 kg (16,5 lbs)
1,4 in/s bei 198 lbs Belastung

Art.-Nr.

Technisches

integrierte Service-Software	inbegriffen
Akku	NiMH 26,4 V-2,2 Ah
Akku-Ladegerät	100-240 V AC, 40-60 Hz
Motor	24 V GS 12 A
Hubgeschwindigkeit	35 mm/s bei 90 kg Belastung
Hubintervall	30 mm
Notabsenkung	mechanisch und elektrisch
Schutzart	Handbedienung IPX4 Hubmotor IPX4
Not-Aus-Schalter	Vom Boden aus mit einer Leine erreichbar. Zurücksetzen möglich.

Reinigungshinweise

Reinigungsmittel müssen pH-neutral sein. Für Desinfektionszwecke Isopropylalkohol benutzen. Keine Lösungsmittel oder scharfen / ätzenden Flüssigkeiten benutzen, da sie die Oberflächen angreifen können.



Molift Air 200

Molift Air 200, mit einer Liftleistung von 205 kg, ist für Einrichtungen in der Langzeitpflege, Seniorenheime und Homecare optimiert. Der Deckenlift wird über den Handschalter aufgeladen.



Funktionelles & modernes Design

Molift Air ist ein starker und benutzerfreundlicher Deckenlift, der Nutzern komfortable und sichere Transfers ermöglicht. Er ist ein innovativer, funktionaler und modern designer Deckenlift für immobile Nutzer. In Kombination mit einem Molift Schienensystem löst er viele Liftsituationen.

Leicht und flexibel

Molift Air ist für sitzende und liegende Transfer sowie Steh- und Gehtraining geeignet. Eine große Auswahl an Zubehör gibt viel Flexibilität. Der Deckenlifter kann an fest montierten aber auch an freistehenden Schienensystemen installiert werden.

Molift Air ist durch das sehr geringe Gewicht und die schnelle Entbindung einfach in der Installation und bei der Wartung. Der Deckenlifter bietet flexible Lösungen wie eine Fernbedienung und Möglichkeiten für den Raum-zu-Raum Transfer - zusätzlich zu den Sicherheitseigenschaften, den langen Hubintervallen und der großen Auswahl an Hebearmen. Es ist die komplette Lösung für alle Gesundheitsbereiche. Molift Air kann leicht an die meisten Schienensystem auf dem Markt adaptiert werden.

Eigenschaften

- Hohe Liftleistung
- Schnelle Kopplung der Aufhängung
- Verschiedene Hebearm-Möglichkeiten
- Schnell Entbindung des Lifters vom Fahrwagen



Molift Air 350

Der Molift Air 350 hat außergewöhnliche Hubleistung und ist hinsichtlich einer langen Lebensdauer und geringen Servicekosten optimiert. Der Deckenlifter passt in die meisten Schienensysteme. Molift Air 350 gibt es in verschiedenen Ausführungen: In-Rail-charging (IRC) - Schienen-Aufladen, Fahrtrieb, kabelloser Handschalter und Lithium-Batterien.



Molift Air 500

Molift Air 500 bietet bei bariatrischen Patienten Hilfe und eine Hubleistung von 500 kg. Die Variante des In-rail-charging ist nur ein Beispiel vieler guter Eigenschaften für eine bessere Benutzerfreundlichkeit. Auch den Molift Air 500 gibt es in verschiedenen Ausführungen: Fahrtrieb und kabelloser Handschalter.



Fakten

	Molift Air 200	Molift Air 350	Molift Air 500
Maximales Benutzergewicht (SWL)	205 kg	350 kg	500 kg
Gesamtgewicht (mit SLA Batterie)	8,6 kg	8,6 kg	15 kg
Länge	360 mm	360 mm	360 mm
Breite	190 mm	190 mm	250 mm
Höhe	195 mm	195 mm	195 mm
Batterie	26,4 V NiMh 2,6 Ah	26,4 V NiMh 2,6 Ah	26,4 V NiMh 2,6 Ah
Batterie-Ladegerät	100–240 V AC, 40–60 Hz	100–240 V AC, 40–60 Hz	100–240 V AC, 40–60 Hz
Batterie-Ladezeit	6 h	6 h	6 h
Motor	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Hubhöhe (maximal)	3000 mm	2600 mm	3000 mm
Hubgeschwindigkeit	60 mm/sek	60 mm/sek	30 mm/sek
Hubintervall	3000 mm	2500 mm	2000 mm
Erwartete Lebensdauer	30 000 Lifts SWL/10 Jahre	30 000 Lifts SWL/10 Jahre	30 000 Lifts SWL/10 Jahre
Integrierte Service Software	inbegriffen	inbegriffen	inbegriffen
Notfallabsenkung	mechanisch und elektrisch	mechanisch und elektrisch	mechanisch und elektrisch
Notfall-Stopp	Durch rotes Signalband erreichbar und Reset-Möglichkeit		
Schutzklasse: Handschalter und Liftermotor	IPX4	IPX4	IPX4





Molift Schienensystem (MRS)

Eine kosteneffiziente und flexible Lösung für jede Umgebung

Effiziente Installationsprozesse

Die Molift Schienensysteme bieten verschiedene Schienenprofile mit innovativen Lösungen für Installation an allen Decken- und Wandtypen.

Es kann einfach integriert und optisch dem Design und der Architektur des Raums angepasst werden. Die Breite an Weichen und anderen Komponenten macht das System extrem flexibel.

Individuelle Kapazität

Abhängig vom Bedarf und der Wahl des Deckenliftmotors, kann das Molift Schienensystem für Hubleistungen von 160 bis 500 kg konstruiert werden.

Kosteneffiziente Lösungen

Der effiziente Installationsprozess, die Flexibilität und die vielen Eigenschaften machen das System zu einer kosteneffektiven, wettbewerbsfähigen und profitablen Investition für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und häusliche Versorgungen. Alles zusammen schafft einen praktischen und effizienten Arbeitsplatz für Pflegendе und ein angenehmes Umfeld für Patienten und Angehörige.

Traversen-Weichensystem

Dieses System ermöglicht die Verbindung zweier Schienensysteme mittels Fangschloss. Nützlich bei Transfers von Raum zu Raum.

Traversensystem

Eine der flexibelsten Lösungen auf dem Markt zur Abdeckung aller Liftbedürfnisse unabhängig von den Raumbegebenheiten.

Ein-Schienen-System

Gerade Schienen und/oder Kurvenschienen bieten einen simplen und effektiven Transfer für die häufigsten Liftsituationen wie Bett zu Rollstuhl.

Raum-zu-Raum-Transfer

Wenn ein Transfer von einem in einen anderen Raum notwendig ist, bietet Molift Raum-zu-Raum-Lösungen mit Kletterfunktion, einem Weichensystem oder einer durchgehenden Türschiene.

Schienen-Weichensystem

Eine Schienenweiche ermöglicht den Wechsel der Richtung bei Einschienensystemen beispielsweise von einer geraden in eine Kurvenschiene.



Flexibles System

- Einfache Installation
- Verschiedene Gewichtsklassen
- Eine Vielzahl von Installationsoptionen: in der Decke integriert, an der Decke oder Wand oder mit Wandstützbeinen
- Möglichkeiten für jede Art von Decke, Wand oder Boden

Möglichkeiten

- Gerade Profile
- Kurven 30, 45, 60 und 90 Grad
- Starre Seiten- u. Teleskophalterungen
- Flexible Traversenoptionen
- Traversen-Fangschloss
- Schienenweiche
- In-rail charging (Aufladen über - Schiene)
- CRT: Durchlauflösung z.B. bei Vorhängen

Maximales Nutzergewicht (SWL)

160–500 kg

Farbe

Weiß

Schienen

3 Varianten:
Höhe: 62/112/142 mm

Maximale Distanz zwischen den Halterungen:

6000 mm

Systeme

Schienen-Weichensystem
Traversen-Weichensystem



In-rail charging (IRC) Schienenladung

Das Aufladen über die Schiene ermöglicht das automatische Batterieladen an jeder Stelle des Systems. So ist der Deckenlift immer einsatzbereit. IRC kann nur in Geraden und in Traversensystemen verbaut werden.

Integrierte Deckenschiene

Bei diesem System wird die Schiene in die Decke eingesetzt: eine schlichte und saubere Lösung.

CRT: Durchlauflösung

Die CRT Lösung erlaubt Unterbrechungen der Schienen, wenn z.B. Vorhänge in Behandlungsräumen dazwischen gezogen werden müssen.

Wandschienen

Wenn eine Installation an der Decke nicht in Frage kommt, können die Schienen mittels einer Wandhalterung befestigt werden.



Professioneller Service

Unsere hauseigenen Fachberater und Monteure sind von Molift A/S aus Norwegen zertifiziert und werden stetig auf Neuerungen geschult. Dabei wird besonders auf die bedarfsorientierte Kundenberatung und die Präzision bei technischen Vorgängen Wert gelegt. Individuelle Kundenbetreuung und speziell geplante Deckenliftsysteme sind selbstverständlich.

Wir bieten:

Technische Problemlösung am Telefon

Unsere geschulten Mitarbeiter können ein Teil der Anfragen schon am Telefon mit Ihnen gemeinsam lösen. In Spezialfällen wird Sie ein Technikexperte zurückrufen. Kann das Problem nicht telefonisch gelöst werden, können Sie Ihr Gerät sowohl einsenden und bekommen bei Bedarf ein Leihgerät oder ein Servicetechniker schaut sich das Problem vor Ort an.

Reparaturen

Wir finden den Fehler bei defekten Geräten und reparieren sowohl **mobile Lifter** durch Austausch, Überprüfung der Komponenten oder Kontakten als auch **Deckenlifter** durch Motortausch oder Platinenwechsel. Entsprechende Ersatzteile sind auf Lager und können durch uns kurzfristig bestellt werden.



Technische Prüfungen



Nach der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) ist jeder Betreiber innerhalb bestimmter Intervalle zu einer **Sicherheitstechnische Kontrolle (STK)** verpflichtet. Diese **Kontrollen zu mobilen Lifter, Deckenlifter und Schienensystem und auch Wartungen** übernehmen wir gerne.

Reinigung

Ihr Gerät soll in den Wiedereinsatz oder ist stark beansprucht worden? Dann bieten wir einen durch Institut Schwarzkopf **zertifizierte Reinigung** Ihres Lifters in unserer Reinigungsstraße.



Planung und Montage von Deckenliftsystemen



Ob bei Beratung im Wohnumfeld oder bei der Projektplanung im institutionellen Bereich stehen wir zur Seite. Wir besprechen Schritt für Schritt welche Schienenlösung aufgrund der Baubgegebenheiten wie Wand-/ Deckenbeschaffenheit, Lampen, Feuermeldeanlage usw. möglich ist:

- **Beratung:** Bedarfsermittlung und bauliche Möglichkeiten
- **Fachgerechtes Ausmessen** und Entwurfszeichnungen
- Individuelle **Angebotserstellung** nach technischen Berechnungen und detaillierte Skizze
- Ggfs. Unterstützung bei der Beantragung beim Kostenträger
- Bestellung der benötigten Materialien bis hin zum geeigneten Liftermonteur
- Schnelle und saubere **Montage** vor Ort nach Terminvereinbarung
- Bei Umzügen bieten wir zudem einen **Demontageservice** des vorhandenen Systems

Sie haben Interesse an einer Servicedienstleistung oder eine technische Frage?

Kontaktieren Sie unseren Kundenservice für ein unverbindliches Angebot:

Tel.: 02366 50060

Fax: 02366 5006210

Mail: molift@etac.de



Sie benötigen Unterstützung bei der Projektplanung?

Für Architekten, Planungsbüros und Bauherren

Martin Grimm

Key Account Manager Molift

Mobil: +49(0)151 11454967

Mail: martin.grimm@etac.com



Molift Quattro

Die temporäre Schienenlösung mit hervorragender Stabilität

Ein freistehendes Gerüst mit Traversensystem

Molift Quattro ist ein freistehendes Deckenlift-Traversensystem. Die beste Lösung, wenn ein System nur vorübergehend benötigt wird oder die Möglichkeit für eine feste Installation nicht gegeben ist. Das Gerüst lässt sich leicht ohne weitere Befestigungen an den Wänden und Decken aufbauen.

Für Deckenlift-Situationen

Das Traversensystem besteht aus einem leichtgewichtigen Aluminium-Rahmen und 4 Stahlpfosten, welche eine herausragende Stabilität geben. Molift Quattro kann mit dem Molift Air und Nomad eingesetzt werden. Mit einer Liftkapazität von maximal 300 kg ist es ideal für alle Transfersituationen.

Eigenschaften

- Einfacher Aufbau - designt für eine schnelle Installation durch vorzugsweise 2 Personen
- Keine Wand- oder Deckenbefestigung notwendig
- Höchste Stabilität und Manövrierbarkeit
- Einfaches Aufladen: der Deckenliftmotor kann einfach über den Handschalter oder durch die Schienen aufgeladen werden



Beschreibung

Molift Quattro 3000 mm	1600030
Molift Quattro 4000 mm	1600035

Art.-Nr.

Zubehör

Einstellbarer Fuß	1610201
-------------------	---------

Art.-Nr.

Die Deckenliftmotoren und Fahrwagen müssen separat bestellt werden.

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie auf S. 38

Material

Stahl, Aluminium, Kunststoff

Gewicht

Maximales Nutzergewicht	300 kg
Gewicht des gesamten Gerüsts Quattro 3 m	111 kg
Gewicht des gesamten Gerüsts Quattro 4 m	132 kg
Pfosten mit einstellbarem Fuß	8.5 kg

Maße

Verfügbare Schienenlängen	3000, 4000 mm
Höhe ohne Fuß	2330 mm
Höhe mit einstellbarem Fuß	2360 - 2430 mm
Innenhöhe ohne Fuß	2190 mm
Breite/Tiefe	3160 - 4160 mm

Maximaler Platz Innenraum

ohne Fuß	3000/4000 x 2190 mm
mit einstellbarem Fuß	3000/4000 x 2240 - 2290 mm

Die Länge der Pfosten sind vorgegeben. Die niedrigste erlaubte Höhe des Systems beträgt 2400 mm.

Technisches

Erwartete Lebensdauer: 30000 Lifts (SWL) oder 10 Jahre



Molift Duo

Das flexible und freistehende Gerüstsystem für den temporären Liftbedarf

Die einfache Lösung für viele Raumgrößen

Molift Duo umfasst ein System, welches ohne Befestigung an Wänden oder Decken aufgebaut werden kann. Es ist ideal für den vorübergehenden Bedarf an Lifts in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und im häuslichen Umfeld. In Kombination mit einem Deckenlift Molift Air, oder Nomad und einem Liftergurt, löst Molift Duo Transfersituationen unabhängig von der Umgebung. Mit einer Liftkapazität von 300 kg ist das System ideal für die gängigsten Transfers geeignet.

Leichte Konstruktion

Molift Duo ist eine leichte Aluminiumkonstruktion und hat ein funktionelles Design. Dieses macht es einfach, das System zu installieren, abzubauen und an einen anderen Ort zu versetzen.

Das 2-Säulengerüst hat eine Schienenlänge zwischen 2000 mm und 3500 mm und ist 4-stufig bis zu 2550 mm höhenverstellbar. Das freistehende Gerüst ist für alle Bett- und Zimmergrößen geeignet.

Eigenschaften

- Einfacher Aufbau - aufgrund des leichten Gewichts, ist die Montage und Demontage einfach
- Das Gerüst hat höchste Stabilität und ein funktionales Design
- Höhenverstellbarkeit: das System kann in 4 Positionen von 2250 bis 2550 mm in der Höhe, mit Hilfe eines Schnellkopplungsstifts, eingestellt werden
- Aufladen der Motoren: der Molift Air bis 300 kg oder Nomad können über den Handschalter am Pfosten montiert und aufgeladen werden



Beschreibung

Molift Duo 2000 mm	1600013
Molift Duo 2500 mm	1600015
Molift Duo 3000 mm	1600017
Molift Duo 3500 mm	1600019

Gewicht

Maximales Nutzergewicht (SWL)	300 kg
Gesamtgewicht	38 - 44,3 kg

Gewichte des Gerüsts

Pfosten mit Bein	14,8 kg
Pfosten ohne Bein	11 kg

Maße

Höhe	2250 - 2550 mm
Tiefe	1200 mm
Maximaler Innenraum	3500 x 2400 mm
Transporthöhe	1700 mm

Material

Eloxiertes Aluminium, Kunststoff





Stretcher

Molift bietet eine Vielzahl von unterschiedlichem Zubehör. Unter anderem werden einzigartige Stretcher angeboten, die bei der 4-Punkt-Aufhängung genutzt werden können.

Molift RgoSling Fabric Stretcher

Ein weicher Textil Stretchergurt für liegende Transfers im Krankenhaus oder in der Pflegeeinrichtung

Der Textilstretcher

Molift RgoSling Fabric Stretcher ist ein weicher Textil Stretchergurt für liegende Transfer im Krankenhaus oder in der Pflegeeinrichtung. Dieser Stretcher wird eingesetzt, wenn ein Sitzgurt durch den Gesundheitszustand z.B. Koma oder Sedierung nicht durchgeführt werden kann.

8-Punkt-Aufhängung

Der Fabric Stretcher bedingt eine 8-Punkt-Aufhängung - kompatibel mit einem Molift Partner 255 und Molift Air. Der Molift RgoSling Fabric Stretcher hat integrierte Schlaufen, die an dem Hebearm befestigt werden können. Die 8 Hebepunkte gewährleisten einen komfortablen liegenden Transfer.



Eigenschaften

- Molift RgoSling Fabric Stretcher wird dann eingesetzt wenn einen sitzender Transfer nicht möglich ist
- Die Anlage des Gurtes ist mit einem Immedia SlingOn leicht durchzuführen
- Stabiler liegender Transfer – die 8-Punkt Aufhängung bietet einen sicheren Transfer



Beschreibung

Molift RgoSling Fabric Stretcher M
Molift RgoSling Fabric Stretcher XL

Art.-Nr.

1721520
1721540

Maße

Länge M 1750 mm
XL 1850 mm
Breite M 450 mm
XL 900 mm

Material

Molift Fabric Stretcher:

Polyester

* SWL ist abhängig von der Liftkapazität des Motors.

Gewicht

Maximales Nutzergewicht (SWL)*

M: 160 kg
XL: 300 kg





Molift Stretcher

Schaufeltrage - ideal für liegende Transfers

Einfaches Handling

Molift Stretcher ist eine Schaufeltrage für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Dieser Stretcher wird eingesetzt, wenn ein Sitzgurt durch den Gesundheitszustand z.B. Koma, Sedierung, Rückenverletzungen oder multiple Frakturen nicht eingesetzt geführt werden kann.

Ideal für Notfallbehandlungen

In Kombination mit einer 4-Punkt Aufhängung, ist die Trage für die Notfallversorgung ideal - wenn die Zeit entscheidend ist und der Patient immobil. Der Molift Stretcher kann in zwei Teile zerlegt werden, um die Anlage unter dem Patienten zu vereinfachen.

Die Trage hat 5 Handgriffe an den Seiten, die alternativ ein manuelles Heben vom Boden oder horizontales Transfers ermöglichen.



Eigenschaften

- Einzigartiges, patentiertes Schaufeldesign für sichere und effiziente Transfers
- Geringes Eigengewicht und leicht zu tragen
- Ein sicheres Verschlussystem - einfach zu öffnen, wenn unbeladen und sicher verschlossen, wenn beladen
- Viele Möglichkeiten der Nutzung für Röntgen, CT und MRI



Beschreibung

Molift Stretcher MRI
 Set Hebegurte Molift Stretcher L=600
 (ohne Aufrollvorrichtung)
 Set Hebegurte mit Aufrollvorrichtung
 für Molift Stretcher
 Set Sicherheitsgurte für Molift
 Stretcher (ohne Aufrollvorrichtung)

Art.-Nr.

2150108
 2150357
 2150356
 2150355

Material

Verbundkunststoff
Edelstahl

Gewicht

Gesamtgewicht
Maximales Nutzergewicht (SWL)*

14,5 kg
300 kg

Maße

Höhe
Länge
Breite

126 mm
1980 mm
630 mm

Kompatibilität

Molift Stretcher MRI:
Für Magnetresonanztomographie, Röntgen und CT.

*SWL ist abhängig von der Liftkapazität des Motors.



Molift Lifter-Zubehör



2-Punkt Hebearm (für QR 205)

Ideal in Kombination mit den RgoSling Standup Hebegurten (siehe S. 14).

Art.-Nr. 2910061



Molift Smart 150 Transporttasche

Die Transporttasche schützt den Lifter und erleichtert den Transport mit Batterie, Ladegerät und Gurt.

Art.-Nr. 3049177



Fußstandserhöhung (für QR 205)

Dieses Zubehör bietet eine 100 mm Fußstandserhöhung. Die Stellschraube ist einfach zugänglich und macht die Adaption leicht (auch für Pädiatrie-Transfers).

Art.-Nr. 2910065



Molift Smart 150 Transportkoffer

Dieser Hartschalenkoffer bietet zusätzlichen Schutz, speziell beim Transport im Flugzeug. Es ist TSA geprüft für den Flugtransport und ideal für aktivere Personen.

Art.-Nr. 0990200



Anti-Rutschmatten für Fußplatte

Anti-Rutschmatten für Fußplatte für Quick Raiser 205.


Art.-Nr. 2920151



Einhängearm für Molift Nomad

Der einzigartige Verlängerungsarm macht das Ein- und Aushängen des Nomas vom Schienenfahrzeug ohne weiteres Werkzeug sehr einfach.

L: 900 mm Art.-Nr. 1200004
L: 1050 mm Art.-Nr. 1200006

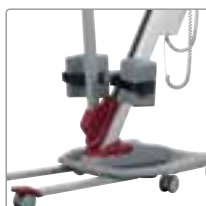

Beinstütze, Halterung und Kissen

Die alternative Beinstütze für den Quick Raiser 205 profitiert von zusätzlichen kleinen oder großen Kissen und einer Beinfixierung für einen sicheren Halt.

Art.-Nr. (S) 2910059
Art.-Nr. (L) 2910056



Rollen mit Richtungssperre

Rad 100 mm.

Verfügbar für Molift Mover 205, 300 und Partner 255.

Art.-Nr. 1320140



Polstersets für QR 205

Ersatzpolster für die gelieferte Beinstütze.

groß 2910076
klein 2910077



Transportwagen für Molift Nomad

Der Wagen ist ideal für den Transport und die Lagerung des Lifts. Es bietet zudem Ablage für den Eingehängerarm Nomad, Gurte und weiteres Equipment.

Art.-Nr. 1200005



Netzteil und Ladegerät

Die Stromversorgung des Molift Quick Raiser 205 erfolgt über integrierte Lithium-Batterien mit einer erwarteten Lebensdauer von 2000 Ladezyklen. Im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 2910041



Molift Waagen

Die Molift Waagen sind nach Klasse III geeicht und erfüllen alle technischen Standards. Diese können sogar dem BMI (Body Mass Index) mit einem simplen Griff kalkulieren.




Premium-Gurte!



Molift RgoSling 4-Punkt

Molift RgoSling bietet eine große Auswahl an Gurtmodellen und -größen, um sicherzustellen, dass wir für jede Anforderung eine Lösung anbieten können. Molift RgoSlings sind für 4-Punkt-Aufhängungen ausgelegt.

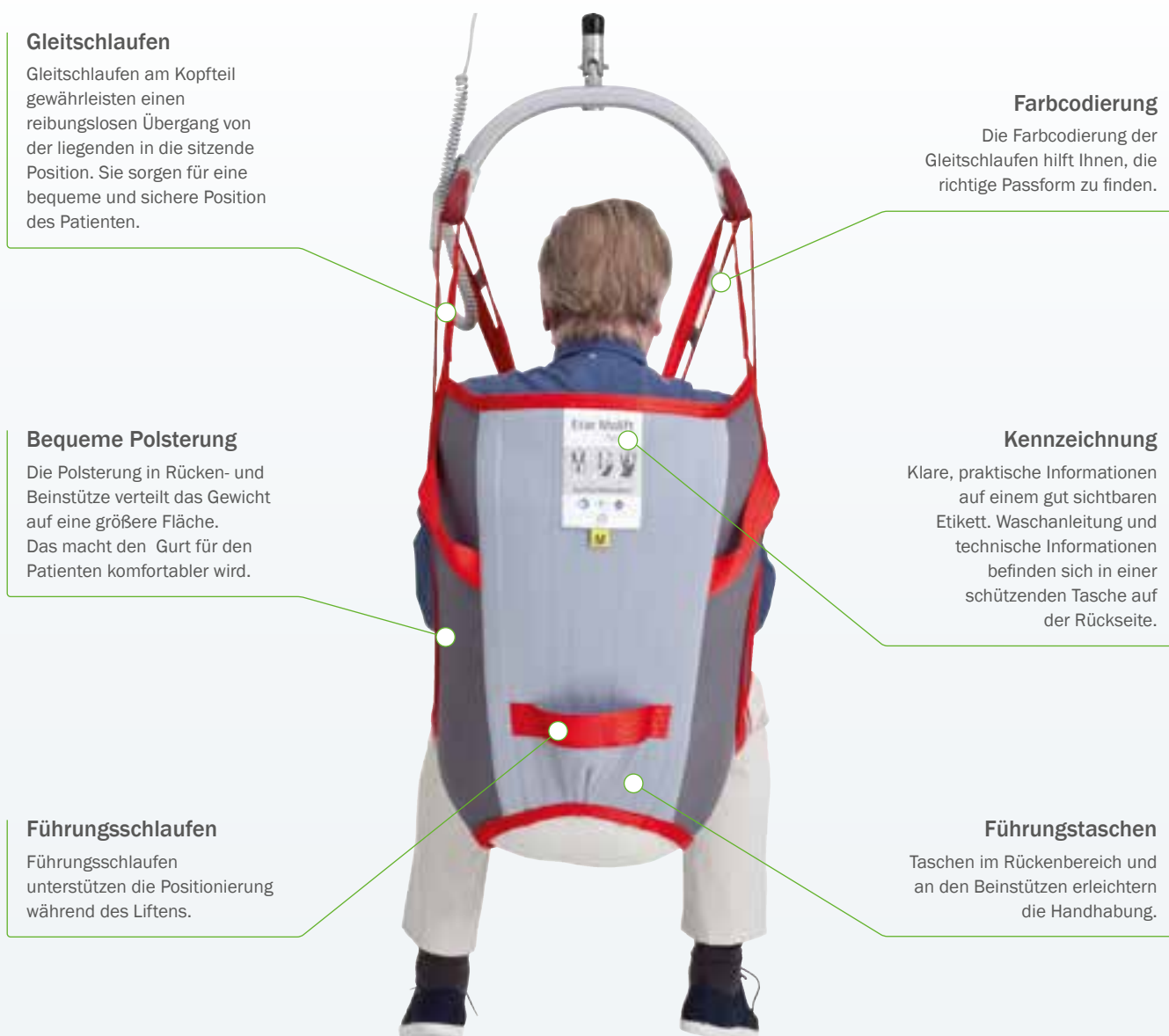

Molift RgoSlings

Molift stellt seit Generationen qualitativ hochwertige Lifter und Gurte her. RgoSling ist eine Auswahl an 4-Punkt-Gurten, die entwickelt wurden, um den Anforderungen des täglichen Bedarfs im Gesundheitswesen gerecht zu werden.

Standardmodelle: HighBack und MediumBack

Unsere Standardmodelle sind für den Einsatz in den alltäglichen Transfersituationen konzipiert und für die meisten Anwender geeignet. Sie sind in zwei verschiedenen Rückenhöhen erhältlich: HighBack und MediumBack.

Modelle mit speziellen Eigenschaften

Wir wissen, dass die Benutzer unterschiedlichste Anforderungen haben, deshalb haben wir zusätzliche Modelle mit spezifischen Eigenschaften entwickelt, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, einschließlich RgoSling Toilette und RgoSling Ampu.



Molift RgoSling HighBack

Standardöffnung der Beinunterstützung

- Unterstützung für Körper und Kopf
- Liften von und in eine liegende Position
- Allround-Gurt, passend für die meisten Patienten
- Liften vom Boden möglich

Molift RgoSling MediumBack

Standardöffnung der Beinunterstützung

- Geeignet für Patienten mit Kopfkontrolle
- Allround-Gurt, passend für die meisten Patienten
- Der Sitzwinkel wird an den Beingurten eingestellt

Badegurt

Badegurt

Größe		HighBack gepolstert	HighBack Netz
XXS		1720200	1720400
XS		1720210	1720410
S		1720220	1720420
M		1720230	1720430
L		1720640	1720440
XL		1720650	1720450
XXL		1720260	1720460

Größe		MediumBack gepolstert	MediumBack Netz
XXS		1720100	1720300
XS		1720110	1720310
S		1720120	1720320
M		1720130	1720330
L		1720140	1720340
XL		1720150	1720350
XXL		1720160	1720360



Molift RgoSling Toilet

Weite Öffnung der Beinunterstützung

- Fixierte Schlaufen
- Für Patienten mit guter Rumpfstabilität
- Komfortable Polsterung
- Flexible Beinunterstützung
- Spezialgurt integriert - für mehr Sicherheit
- Gurt mit guter Zugänglichkeit, zum Beispiel beim Toilettengang

Molift RgoSling Amputee

Enge Öffnung der Beinunterstützung

- Spezialgurt integriert - für mehr Sicherheit
- Für Patienten mit geringer Rumpfstabilität
- Komfortable Polsterung
- Gleitschlaufen am Kopfteil
- Einfach anzulegen und zu entfernen
- Ideale Lösung für Benutzer mit einer hohen Amputation

Größe		LowBack	HighBack
XXS		1720500	1720600
XS		1720510	1720610
S		1720520	1720620
M		1720530	1720630
L		1720540	1720640
XL		1720550	1721450
XXL		1720560	1720660

Größe		MediumBack	HighBack
XXS		1721100	1721200
XS		1721110	1721210
S		1721120	1721220
M		1721130	1721230
L		1721140	1721240
XL		1721150	1721250
XXL		1721160	1721260



Molift RgoSling Shadow

Standardöffnung der Beinunterstützung

- Geeignet für Benutzer in Sitzschalen
- Kann im Rollstuhl unter dem Patienten verbleiben
- Dünnes Gurtband
- Polyester Netzgewebe
- Keine Riemen, Nähte, Taschen für Etiketten in Kontakt mit dem Patienten

Molift RgoSling Komfort HighBack

Ohne Beinspreizung

- Volle Körper- und Kopfunterstützung
- Kann im Rollstuhl unter dem Patienten verbleiben
- Polyester-Netz, das für gute Belüftung sorgt
- Keine Riemen, Nähte, Taschen für Etiketten in Kontakt mit dem Patienten
- Die rote Naht zeigt die Mittellinie des Rückens an, um die korrekte Positionierung zu erleichtern

Größe		HighBack		Größe		HighBack	
XXS			1722900	XS			1721410
XS			1722910	S			1721420
S			1722920	M			1721430
M			1722930	L			1721440
L			1722940	XL			1721450
XL			1722950	XXL			1721460



Molift RgoSling Ambulating Vest

Unterstützung für das Gehtraining

- 4 Haltegurte mit fixierten Schlaufen
- Sich selbst spannender Gurt in der Taille
- Steh- oder Gleichgewichtsübungen
- Doppelschnallen für zusätzliche Sicherheit
- Standard-Polyester-Gewebe mit Polsterung
- Gepolsterter Leistengurt als Zubehör

Größe

XXS			1721300
XS			1721310
S			1721320
M			1721330
L			1721340
XL			1721350

Ohne Leistenbänder. Siehe dazu S. 55



Molift RgoSling Repositionierungstuch

Das Molift Repositionierungstuch ist ein Hilfsmittel für die effektive Versorgung von bettlägerigen Patienten. Das Repositionierungstuch erleichtert Hebevorgänge, vermindert das Verletzungsrisiko in der Pflege und fördert eine höhere Versorgungsqualität von Patienten.

Risiken reduzieren und Zeit sparen

Die Positionierung und der Transfer von bettlägerigen Patienten wird unzählige Male am Tag wiederholt und ist mit hohen Verletzungsrisiken verbunden. Das Repositionierungstuch von Molift reduziert das Verletzungsrisiko und trägt zu einer höheren Versorgungsqualität durch die Unterstützung kraftanstrengender Lifts und Transfers im institutionellen Bereich bei.

Erleichterung der Pflegesituationen

Das Molift Repositionierungstuch eignet sich durch das maximale Nutzergewicht für die bariatrische Pflege. Das Liftertuch ist zum Wenden und Heben von bettlägerigen Patienten geeignet. Es ist ebenso für Bett zu Bett Transfers entwickelt worden. Bei der Versorgung und Behandlung von z.B. Wunden und Hautproblemen, kann das Liftertuch mittels Lifterunterstützung einen guten Zugang zu verschiedenen Teilen des Körpers bieten. Das Repositionierungstuch ist beispielsweise auch sehr nützlich beim Wechsel der Bettwäsche.

Komfortable und würdige Pflege

Das Molift Repositionierungstuch ist als In-Bett-System für maximalen Patientenkomfort konzipiert.

Da das Liftertuch immer im Bett verbleiben kann, ermöglicht es eine schnellere und einfachere Pflegesituation für die Betreuer und Patienten. Bariatrische Versorgungen erhöhen die Anforderungen in der Pflege, die das Repositionierungstuch lösen kann.

Das Molift Repositionierungstuch ermöglicht eine ergonomische Unterstützung für den Körper des Benutzers. Es trägt zu maximalem Komfort, zu einem sicheren Gefühl in der Transfersituation, bei Lagerungen und Neupositionierungen bei.



Produkt

Molift RgoSling Repositionierungstuch
Molift RgoSling Repositionierungstücher

VE

1 Stück
10 Stück

Art.-Nr.

1721570
1721570-C

Waschanleitung



Maschinenwäsche - max. Temperatur 85 °C. Waschen bei niedrigeren Temperaturen kann die durchschnittliche Lebensdauer des Produkts erhöhen. Trocknung im Wäschetrockner - niedrige Temperatur; max. Temperatur 60°C. Nicht bügeln. Keine chemische Reinigung. Nicht bleichen.

Material

Repositionierungstuch: 100 % Polyester
Hebegurt: 100 % Polyester

Details

8 Gurte mit festen Schlaufen, ¼ Länge des Bettes
Länge: 1340 mm
Width: 1300 mm







Spezialgurte!



Molift EvoSling 2-Punkt

Molift EvoSling bietet eine große Auswahl an Gurtmodellen und -größen, um sicherzustellen, dass wir für jede Anforderung eine Lösung anbieten können. Alle Molift EvoSlings sind für einen 2-Punkt-Hebearm konzipiert.



Molift EvoSlings

Molift stellt seit Generationen qualitativ hochwertige Lifter und Gurte her. EvoSling ist eine Auswahl an 2-Punkt-Gurten, die entwickelt wurden, um den Anforderungen des täglichen Bedarfs im Gesundheitswesen gerecht zu werden.

Modelle mit speziellen Eigenschaften

Wir wissen, dass die Benutzer unterschiedlichste Anforderungen haben, deshalb haben wir zusätzliche Modelle mit spezifischen Eigenschaften entwickelt, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.



Molift EvoSling LowBack

Standardöffnung der Beinunterstützung

- Geeignet für Patienten mit Kopfkontrolle
- Komfortable zurücklehrende Sitzposition
- Allround-Gurt, passend für die meisten Patienten
- Netz-Version hat gepolsterte Beine für zusätzlichen Komfort

Größe		LowBack gepolstert	LowBack Netz gepolstert	Größe		LowBack gepolstert	LowBack Netz gepolstert
XS		1722310	1722510	L		1722340	1722540
S		1722320	1722520	XL		1722350	1722550
M		1722330	1722530	XXL		1722360	1722560



HighBack Netz



Molift EvoSling Shadow HighBack

Standardöffnung der Beinunterstützung mit Beinspreizung

- Patienten die besonders viel Unterstützung brauchen
- Wenn der Gurt unter dem Benutzer verbleiben soll
- Sechs Riemen bieten mehr Unterstützung, Sicherheit und Flexibilität
- Arme können innerhalb oder außerhalb des Gurtes platziert werden
- Dünnes Gurtband: keine Gurte, Nähte, Taschen oder Etiketten in der Kontaktfläche zum Benutzer

**Gurt für Sitzschalen-
Versorgungen**

Größe

XXS		1723900
XS		1723910
S		1723920

HighBack

Größe

M		1723930
L		1723940
XL		1723950

HighBack



Molift EvoSling FlexiStrap

Vermeidet schweres Heben eines Beins oder Arms

- Liftet ein Bein oder einen Arm, um schweres Heben zu vermeiden
- In zwei Größen erhältlich
- Gepolstertes Polyester für bequemes Liften
- Führungstasche auf einer Seite des Hebebandes, um die Anwendung zu erleichtern

Version	Breite x Länge	FlexiStrap
Molift EvoSling FlexiStrap, standard	150 x 950 mm	1723310
Molift EvoSling FlexiStrap, wide	250 x 950 mm	1723330





Molift UnoSling

Gurte für den kurzfristigen Gebrauch sind spezifisch für einen einzelnen Benutzer, ein patientenspezifischer Gurt (SPU – Single Patient Use) und eine wirksame Lösung zur Verhinderung der Übertragung von Infektionen. Molift UnoSling ist für 2-Punkt- und 4-Punkt-Aufhängungen ausgelegt.



Molift UnoSling HighBack

Standardöffnung der Beinunterstützung

- Ein personalisierter Einweggurt für den kurzzeitigen Gebrauch
- Heben in und aus der liegenden oder sitzenden Position
- Unterstützung für den gesamten Rücken und den Kopf



Der Einweggurt wird in einer Verpackung geliefert, die das Lagern und Entnehmen eines neuen Gurtes bei Bedarf erleichtert. Für Einrichtungen mit Bedarf für kurzzeitigen Gurteinsatz, kann mehrmals vom selben Patienten verwendet werden.

Größe	Verpackungseinheit (VE)	Art.-Nr.	Einwegprodukt
S	20	3060020	Nicht waschen. Der UnoSling sollte entsorgt werden, wenn der Benutzer ihn nicht mehr benötigt, er beschädigt und/oder verschmutzt ist.
M	20	3060030	
L	20	3060040	
XL	20	3060050	
XXL	10	3060060	



Den richtigen Gurt finden!

Material



Polyester

Standard



Polyester Netz

Weiches Netzmaterial, das gut atmet und schnell trocknet.

Geeignet für die Dusche und Badesituationen.



Vliesmaterial

Vlies für patientenspezifische Gurte, wenn der Gurt nur für kurze Zeit verwendet wird – meist in Krankenhäusern.



Details

Größe

Empfohlenes Benutzergewicht

XXS	12 - 17 kg
XS	17 - 25 kg
S	25 - 50 kg
M	45 - 95 kg
L	90 - 160 kg
XL	160 - 240 kg
XXL	230 - 300 kg

Waschanleitung



Waschen bei 60-85°C / 140-185°F

Durch das Waschen bei höheren Temperaturen wird das Material schneller abgenutzt.

max
300
kg

max
660
lbs



Molift Gurt-Zubehör



Molift EvoSling Support

Zubehör für Gurte ohne Kopfstütze
Die Kopfstütze ist an einer Schlinge befestigt und ihre Länge kann mit der Kunststoffschnalle nach Bedarf eingestellt werden. Es ist eine nützliche Ergänzung, wenn der Patient mehr Halt benötigt.



Molift EvoSling Soft Polster

Für druckempfindliche Patienten
Polster besteht aus druckentlastender Polsterung, die über die Beinteile des Gurtes mit Beinspreizung gezogen werden. Waschbar bei 40 Grad.



Molift RgoSling Verlängerungsschlaufen

Schlaufen für die einfache Anpassung bei RgoSlings: Nutzbar zur Verlängerung, flexible für 3 Längen.



Molift EvoSling Verlängerungsschlaufen

Schlaufen für die einfache Anpassung bei RgoSlings: Nutzbar zur Verlängerung oder zu Befestigung der Beinstützen.



Molift Schlaufen-Marker

Zur Markierung einer ausgewählten Schlaufe bei Gurten.



Molift Ambulating Vest Groin Bänder

Diese Leistenbänder werden um das Bein gelegt, um das Risiko der Druckbelastung zu minimieren.



Molift Aufbewahrungssystem

Diese Tasche ist nützlich um Zubehör aufzubewahren und Molift Gurte professionell zu präsentieren.



Immedia SlingOn

Wenn ein Nutzer nicht auf die Seite gedreht werden kann, kann das Immedia SlingOn mit einer speziellen Falttechnik eingesetzt werden, um einen Gurt ohne Drehen unter dem Patienten anzulegen. Waschbar bei 80 Grad.

Produkt		Art.-Nr.
Molift EvoSling Support-Kopfstütze		1723400
Produkt (Paar)	Größe	Art.-Nr.
Molift EvoSling Soft Polster	XS-M	1723710
Molift EvoSling Soft Polster	L-XXL	1723740
Molift EvoSling Hygiene Soft Polster	S-XXL	1723810
Produkt	Verlängerung	Art.-Nr.
Molift RgoSling Verlängerungsschlaufen	Flexibel: +60, +180 oder +260 mm	1721600
Molift EvoSling Verlängerungsschlaufen	+90 mm	1723510
Molift EvoSling Verlängerungsschlaufen	+180 mm	1723520

Produkt (Paar)		Art.-Nr.
Molift Schlaufen-Marker		1723600
Produkt	Größe	Art.-Nr.
Molift Ambulating Vest Groin Bänder	XXS-XS	1721700
Molift Ambulating Vest Groin Bänder	S-M	1721720
Molift Ambulating Vest Groin Bänder	L-XL	1721740
Produkt		Art.-Nr.
Molift Aufbewahrungssystem		3030700
Produkt	Größe	Art.-Nr.
Immedia SlingOn (S)	800 x 1000 mm	IM437/S
Immedia SlingOn (M)	800 x 1700 mm	IM438
Immedia SlingOn (L)	1200 x 1500 mm	IM437



“Jeder sollte in der Lage sein, ein freies und unabhängiges Leben zu führen
und seine Träume ungeachtet aller physischen Umstände zu verfolgen”

Für die neuesten Nachrichten und ständig aktualisierte
Produktinformationen – besuchen Sie: www.etac.de